

監修：静岡県立こども病院
 専門作業療法士(福祉用具)
 鴨下賢一
 静岡県工業技術研究所

◇表示者：株式会社ゴムQ

福祉事業部：静岡県掛川市国安24-8
 TEL：0537-72-5772
 FAX：0537-72-5772
 Mail：info@gomuq.com
 H P：http://www.gomuq.com

この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使い頂けます。

Qスケール¹⁵

名前シール2枚入り *製品の固定性が低下するおそれがあるため、名前シールは定規の表面に貼って使用してください。



(全3色)

UD

特許出願中

◇Qスケールの効果

●シリコンで覆われているため滑りません！滑らないので真っ直ぐな線が引けます。



ツマミ部分を持つことで、定規の移動が容易にできます。




定規のどの部分を押さえれば一目瞭然です。



シリコン製なので定規が滑りやすく操作が確実に行うことができます。

◇Qスケールの特徴

¥1,995(税込) ●15cm定規 ●カラー：オレンジ、ピンク、ブルー

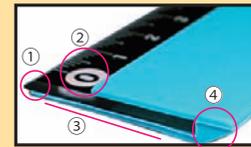

⑤ 拡大

裏面

- ①端が斜めになっているため、線を引きやすく、カッターなども使いやすくなっています。
- ②目盛りが白黒で視認性が高く読みやすくなっています。
- ③底面全体は独自の形状になっており、定規を使用する際に力が入りやすくなっています。
- ④底面の片側は独自の形状になっており、置いた位置から持ち上げやすくなっています。
- ⑤裏面が全面シリコンで覆われていて定規が滑るのを防止します。

◇Qスケールはこのようなおすすめします

- 上肢機能にまひや障がいがある方
- 発達障がいのお子様など、右手左手の動きが未分化で両方の手で同じ作業を行う傾向のある方

当社製品の「Qデスクシート」と併せて使用するとより効果的です。



定規を使い始めのお手様にもオススメ!!!

名前シール2枚入り *製品の固定性が低下するおそれがあるため、名前シールを吸盤面や、付属のシリコンマット表面に貼ってください。

押しボタンスイッチ補助具 Qスイッチ

◇従来の押しボタンスイッチでは...

押しボタンスイッチで、運動障害をもつ方々の様々な部位や動きに対応するためには、固定用アームを併用することが必須でした。しかし、固定用アームの設置が難しいケースもあります。例えば、床に対して水平方向の動きでスイッチを押したい場合には、押しボタンスイッチが縦になる位置で固定する必要があります。

◇Qスイッチを設置することで...

そんなときQスイッチは、押しボタンスイッチに「ベタッ」と貼付けるだけで解決します。さらに、固定用アームを併用しなくても水平の動きに対応できます。これは、Qスイッチがテコの役割を果たすからです。従って、力の弱い方でも、さまざまな動きに簡単に対応できます。付属のシリコンマットを併せて使用することで、スイッチの固定性や操作性を高めることができます。



この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使い頂けます。

横方向からの弱い力でも、スイッチの入力を行うことができます。強力な吸盤付きではなくなっています。
 ※小型スイッチのみ「ツイスタタイプ」にはご利用頂けません。

- Lサイズ ¥3,675(税込) / Mサイズ ¥3,360(税込)
- カラー：オレンジ、ピンク、ブルー

◇使用方法 Qスイッチ(L)使用時

Qスイッチは押しボタンスイッチの中央に取り付けてください。



スイッチの底面には付属のシリコンマットを敷き、使用の際にスイッチがずれないようにします。

※テントウムシ：男の子/女の子共通で好きな昆虫の第一位 かわいいテントウムシの印刷入り※

吸盤付きなので、手軽に設置が可能。付属のシリコンマットで固定性を高める。Qスイッチのテントウムシの印刷には特殊なインクを使用しており、製品の性質(耐熱温度200℃、耐寒温度-40℃)そのままご利用頂けます。

持ち方補助具 Qグリップ

◇Qグリップの効果

- Qグリップの角柱状の部分握ることで、小指側が安定し、親指側の操作性が高まります。将来的にはQリングへの移行を容易にし、さらにはこれらの補助具を利用しなくても、正しく鉛筆などを握る方向へ促します。
- 脳性まひなどで強く握り込んでしまう方や筆圧の強い方は、強く握りこまくなり、筆圧が低くなる傾向があります。
- 力が弱く筆圧が低い方は、手指に力が入りやすくなり、筆圧を高める効果があります。

◇Qグリップの特徴

- Qグリップは、角柱状の部分とリング部分とで、硬さが異なります。握る部分：消しゴム程度の硬さ。角柱状部分(消しゴム程度) / リング部分(人肌よりやや硬め)
- Qグリップは鉛筆以外にも、様々な「持つ行為」をお助け致します。指にはめる部分：人肌よりやや硬め

◇Qグリップはこのようなおすすめします

- Qリングをうまく利用できない方。握ることができる / 指の関節の動きはあまりない。指はほとんど動かさず、腕や手首の動きで字を書く。鉛筆などを正しく・うまく持つためには、チョキの形をするように、薬指と小指だけを曲げていられる必要があります。この動きが不十分な場合は、Qリングを使用しても鉛筆などをうまく持てない場合があります。
- 脳性まひ、広汎性発達障がい、頸髄損傷、学習障がい、発達性協調運動障がい、その他何らかの原因で手指機能が未発達であったり、障がいをお持ちの方

この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使い頂けます。

UD 特許出願中

名前シール2枚入り

- Qグリップ ¥2,730(税込) カラー：オレンジ、ピンク、ブルー
- Qグリップソフト ¥3,150(税込) カラー：ブルー

大人の方 / 指の太い方向け

握る部分：消しゴム程度の硬さ
 指にはめる部分：人肌よりやや硬め



手指の分離が未発達のため、鉛筆やスプーンなどがうまく持てない事例

◇使用方法




角柱状のグリップ部分は、掌からはみ出さない程度の長さになるように長さを確認し、一度親指から外して、ハサミなどで切ります。



Qリング同様に大きな穴に親指の付け根まで、小さな穴に鉛筆などを差し込みます。



ご使用の際は必ず親指の付け根まではめてください

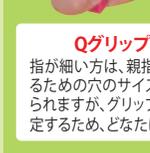

Qグリップはフリーサイズ。指が細い方は、親指の太さに対して指を入れるための穴のサイズが大きすぎないように感じられますが、グリップを握ることで親指側が安定するため、どなたにもお使い頂けます。

その他使用例



この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使い頂けます。

Qデスクシート

UD 特許出願中

(全3色) 名前シール2枚入り

*製品の固定性が低下するおそれがあるため、名前シールはシート表面に貼って使用してください。

本をめくりやすい



下敷きの代用品として

◇Qデスクシートの効果

- 上肢機能に障がいがある人や、不器用さをもつ人たちは、一方の手で紙を固定しながらもう一方の手で筆記を行うといった両手での作業が困難な場合があります。Qデスクシートを下敷きの代用品として利用することで、紙がズレにくくなり、紙を押さえなくても字を書いたり、消しゴムを使ったりすることができます。

● コンパス使用時には針がしっかりと刺さり、紙もズレにくいいため、コンパスを容易に操作できます。また、印刷された目盛りを使用することで、コンパスで使用する長さに合わせやすくなります。

◇Qデスクシートの特徴

- Qデスクシートは滑りにくいだけでなく、適度な硬さも備えているため、下敷きの代用品として、またはコンパス用のマットとしてもお使いいただけます。
- Qデスクシートの目盛りの印刷は特殊なインクを使用しており、製品の性質(耐熱温度200℃、耐寒温度-40℃)そのままご利用頂けます。
- Qデスクシートは約2mm厚のシリコンシートのため、コンパス使用時にも、コンパスの針が突き通すこともありません。

サイズは2種類

- 324×232mm(A4超) ¥5,460(税込)
- 400×400mm(フリー) ¥6,825(税込)

目盛り印刷入り



厚みは約2mm




◇使用方法



針がしっかりと刺さり、紙もズレにくいことでコンパスの操作が容易になります。

片手でも消しゴムを使うことができます。

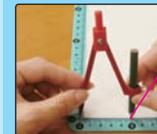

印刷された目盛りを使用して、長さを合わせるできます。

紙の押さえが不十分でも、シリコンゴムの強い滑り止め効果により、紙がズレるのを防ぎます。

当社製品の「Qスケール15」と併せて使用すると、より効果的です。

◇Qデスクシートはこのようなおすすめします

- 脳性まひ、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、発達性協調運動障がい、広汎性発達障がい、脳卒中後片まひ、失調症、その他上肢機能に障がいのある方



お食事・学習お助けリング 持ち方補助具 Qリング

日本製
MADE IN JAPAN

ご使用の際は必ず親指の付け根まではめてください

こども病院の鴨下です。
是非、お試しください。

静岡県立こども病院
専門作業療法士(福祉用具)
鴨下賢一

新作も加わって
新たにリニューアル

書く練習のポイント

1. 3点での安定した固定が重要です
2. 筆圧にこだわらずに、低いときはマジックなどを利用しましょう。
3. 書くことが楽しくなるようにしましょう
4. 書いたものをほめ、飾ってあげましょう



あなたの「使いたい」を
応援します。



うまく鉛筆やスプーンなどを持ってない原因
これまでの持ち方補助具はなかなか上手く持つ事ができるようにならないものがほとんどでした。いろいろな形や素材で「持つ部分」が工夫してあるのに・・・なぜでしょう。

Qリングは上手に持つために欠かせない「3点固定」に着目した製品です。

その他の使用例



選び方のポイント

対象年齢は目安です。
お好みの装着感のものをお選びください。

親指のサイズ	細	←	→	太
選び方のポイント	指の穴のサイズ	888	888	888
素材	硬い/伸びる	やわらかい/よく伸びる	硬い/伸びる	やわらかい/よく伸びる
色	濃い	薄い	濃い	薄い
価格	3個入り ¥1,103 (税込)	3個入り ¥1,838 (税込)	3個入り ¥1,103 (税込)	3個入り ¥1,838 (税込)
親指のサイズ	細	←	→	太

- 耐熱性** 耐熱温度 200° 耐寒温度 -40° 食器洗浄機で洗え、衛生的。Qスケールの耐熱温度 60°
- 耐候性** 紫外線につよい。直射日光や高温多湿の場所で保管しても劣化しません。
- 食品衛生法基準クリア** 万が一、口に入れてしまっても安心。
- シリコン製** 超低硬度特殊シリコン素材。天然ゴム由来の成分による抗原抗体反応を引き起こしません。
- 耐薬品性** アルコール消毒ができ、衛生的。
- 耐水性** 水洗いができ、衛生的。
- 耐久性** 長く使えて、経済的。
- 日本製** 全製品、安心品質の100%日本製。

お客様記入欄

会社名・団体名				様
ご住所	〒			
お電話・FAX番号	TEL:		FAX:	
ご担当者氏名(カナ)				様
支払い方法 チェックしてください	代金引換(現金)	代金引換(クレジット・デビット)	銀行振込	

名前シール2枚入り *製品の固定性が低下するおそれがあるため、名前シールは座面の表面に貼って使用してください。

Qチェアマット

特許出願中
UD
(全3色)

この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使い頂けます。

◇使用方法

椅子などの座面にQチェアマットを敷き、両側の坐骨に体重をかけ、骨盤が中間位になるように座ります。Qチェアマットを敷くと座面が滑りにくくなり、学習に適した姿勢を保つことが可能になります。

学校の椅子以外にも、車椅子や浴槽など様々な場面でお使いいただけます。

使用上の注意



◇Qチェアマットはこのようなおすすめします

- 通常の椅子における学習に適した座位姿勢保持が困難な方
- 学習障がい、注意欠陥多動性障がい、発達性協調運動障がい、脳性まひ、広汎性発達障がい、その他座位姿勢が崩れやすい方

◇Qチェアマットの効果

¥5,670(税込) ●290x230mm
カラー:オレンジ・ピンク・ブルー

学校などで使用される木製の椅子は、硬く滑りやすいため、学習に適した姿勢を保持しにくいことがあります。

Qチェアマットはこの悪循環を断ち切る製品です

学習に適した姿勢をとることで、注意力の向上や、道具の操作が行いやすくなり、結果として、学習効率の向上にもつながります。

学校などで通常使用される木製の椅子は硬く滑りやすい

お尻が滑りやすく姿勢が悪くなる
お尻が痛くなりますます姿勢が崩れる
落ち着きがなく見えてしまう作業効率が悪くなる

◇Qチェアマットの特徴

- 表面の特有の形状により、座面に敷いたときにお尻が滑りにくくなります。
- Qチェアマット裏面の「ハニカム構造」には、体圧分散効果もあり、長時間の着座によってお尻が痛くなるのをやわらげることができます。



Qチェアマット使用時/未使用時の体圧分散測定結果



こどもたちの声
お尻が痛くなくて気持ちいい
シリコンゴムのクッション性によりお尻が痛くなりにくい

特定商取引法に基づく表記

商品以外の必要代金
※消費税は商品代金に含まれており、商品代金の他に、送料、及び支払方法に準ずる各種手数料が発生致します。

配送について
【代金引換】商品と同梱に、商品と交換で代金をお支払い頂きます。ご注文確定後、3営業日以内に発送致します。
※沖縄送料が1000円(3日間) / 1000円~3000円(4日間) / 代別手数料 3000円~10000円(6日間) / 10000円~10500円(8日間)決済ご利用の際は別途手数料228円が必要となります。
【送料】お客様からの入金を確認後、3日以内に発送致します。
※送料は当店で負担にて発送いたします。
※お届けから8日以上経過した商品
※お客様が身損・破損された商品
※お客様が加工された商品
※通関税関に限りははクーリングオフ適用外となります。
※沖縄送料が1000円(3日間)での配送となります。予めご了承ください。

返品について
商品・数量
商品の品質については万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損している場合、またはご注文と異なる場合は、到着後7日以内にご連絡下さい。
送料は当店で負担にて返金・交換致します。
お客様のご都合や一部商品においては原則として返品・交換は承る事ができません。
お客様が一度ご使用になった商品
お客様が加工された商品
※通関税関に限りははクーリングオフ適用外となります。

注文方法
弊社ホームページ、Eメール、お電話、またはFAXでもご注文を承っております。

注文内容確認後、折り返しご連絡致します

その他 GomuQHP(www.gomuq.com)にて販売中です

(株)ゴムQ
静岡県掛川市国安24-8
TEL : 0537-72-5772
FAX : 0537-72-5772
Mail : info@gomuq.com
H P : www.gomuq.com



携帯からも注文できます

商品名	製品	色	数量	販売価格(税込)	ご注文数
Qリング おためしセット(キッズ)	Qリング2+	オレンジ	1	¥980	/SET
	Qリング2+S	薄オレンジ	1		
Qリング おためしセット(レギュラー)	Qリング4+	オレンジ	1	¥980	/SET
	Qリング8+	薄オレンジ	1		
Qリング 2+(3個入り)	Qリング2+	オレンジ	1	¥1,103	/SET
		ピンク	1		
		ブルー	1		
Qリング 2+ソフト(3個入り)	Qリング2+S	薄オレンジ	1	¥1,838	/SET
		薄ピンク	1		
		薄ブルー	1		
Qリング 4+(3個入り)	Qリング4+	オレンジ	1	¥1,103	/SET
		ピンク	1		
		ブルー	1		
Qリング 8+(3個入り)	Qリング8+	薄オレンジ	1	¥1,838	/SET
		薄ピンク	1		
		薄ブルー	1		
Qスケール15	取手色	オレンジ	1	各¥1,995	/SET
		ピンク	1		
		ブルー	1		
商品名	色	数量	販売価格(税込)	ご注文数	
Qチェアマット	オレンジ	1	各¥5,670		
	ピンク	1			
	ブルー	1			
Qデスクシート(A4サイズ)	オレンジ	1	各¥5,460		
	ピンク	1			
	ブルー	1			
Qデスク フリー(400x400mm)	オレンジ	1	各¥6,825		
	ピンク	1			
	ブルー	1			
Qスイッチ(Lサイズ/大型スイッチ用)	オレンジ	1	各¥3,675		
	ピンク	1			
	ブルー	1			
Qスイッチ(Mサイズ/小型スイッチ用)	オレンジ	1	各¥3,360		
	ピンク	1			
	ブルー	1			
Qグリップ	オレンジ	1	各¥2,730		
	ピンク	1			
	ブルー	1			
Qグリップ ソフト	ブルー	1	¥3,150		

ご記入後、(株)ゴムQへ FAX: 0537-72-5772 FAX送信でご注文完了



監修：静岡県立こども病院
 専門作業療法士(福祉用具)
 鴨下賢一
 静岡県工業技術研究所

◇表示者：株式会社ゴムQ
 福祉事業部：静岡県掛川市国安24-8
 TEL：0537-72-5772
 FAX：0537-72-5772
 Mail：info@gomuq.com
 H P：http://www.gomuq.com

こども病院の鴨下です。
是非、お試しください。


静岡県立こども病院
 専門作業療法士 鴨下賢一

はさみ動作補助具

Qカット



名前シール2枚入り

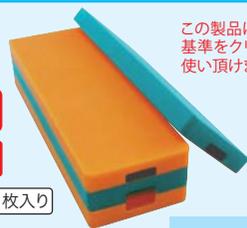

この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使いいただけます。

¥10,290(税込) ●カラー：オレンジとブルーのミックスカラー

このような方におすすめします
 脳性まひ、脳卒中後片まひ、頸椎損傷、筋ジストロフィー、上肢切断、その他上肢機能に障がいのある方

◇使用上の注意 ●顔などにあたると危険ですので投げないでください。●運動障がいがある場合には、適切な姿勢で、適切な部位で使用する必要があります。●正しい使用方法については、作業療法士などの専門家に相談ください。

Qカットの効果

片手でも上手くハサミが使えるようになります。通常ハサミで紙を切るためには、片手で紙を持ち反対の手でハサミを操作します。ところが、上肢の片側にまひ等の障がいがある場合は、上手く切ることが困難な場合があります。Qカットは紙を固定するツールとして、片手で紙を切る作業を可能にしました。

Qカットの特徴

- 上フタと下台が強力な磁力で引きあうため、台の位置が合わせやすくなっています。結果、片手で容易に紙をはさむことができます。
- シリコンゴムの強い滑り止め効果により、台が動くことなく安心してハサミを使うことができます。
- ぶんちんとしても利用することができます。

使用方法



- 上フタを外します。上フタの中央部分を持ち上げると容易に外すことができます



- 台の上に紙を置きます。●上フタを紙の上に置き、紙をはさみます。



- ハサミを持った手の小指側を机に当てたまま、手前から反対側にスライドするように紙を切ります。

- 台の端まで紙を切ったら再び上フタを外し、紙の位置をズラして再度固定し直します。

感覚の欲求充足補助具

Qキャップ

(全2色)



この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使いいただけます。

転がり防止の突起つき



◇使用上の注意 ●保護者の監督のもとで使用ください。●食品衛生法基準をクリアしておりますが、万が一誤飲された場合にはすぐに医師の診断を受けてください。●製品性質上、破損の恐れがあります。破損した状態での使用は大変危険ですのでおやめください。●Qキャップは鉛筆から外さないでください。外した結果生じた損害について、当製品関係者は一切責任を負いません。●正しい使用方法については、作業療法士などの専門家に相談ください。●Qキャップは使いきり製品です。

セットでの購入がお得

オレンジ、ブルー 各¥680(税込)
 ●カラー：オレンジ、ブルー
 ●専用鉛筆(2B)付き

Qキャップの効果

- 鉛筆にキャップとして装着、使用する製品です。噛むことで感覚的な欲求が満たされ気持ちを落ち着かせます。
- お使いになる方の体や衣類を保護します。体に有害な鉛筆の黒鉛摂取を防止します。

Qキャップの特徴

- 文房具として携帯できるため、授業中も使用でき、学習への集中力を高めます。
- 歯や顎の保護に最適な硬さで設計されています。
- キャップの先端が閉じているため、噛んだ際に唾液が侵入するのを防ぎます。
- 当製品は食品衛生法基準をクリアしており、口に入れても問題ありません。

このような方におすすめします

噛み癖のある方、広汎性発達障がい・アスペルガー障がい・注意欠陥多動性障がい・その他の発達障がいの方で口腔からの感覚や固有感覚の感覚欲求がある方、その他、爪を噛む癖のある方など

噛むことで気持ちを落ち着かせます



使用方法 鉛筆に3センチ以上差し込んだ状態でご使用ください

- Qキャップは、鉛筆から外さずそのままお使いください。通常のキャップのように、筆記後に黒鉛部をカバーする製品ではありません。(鉛筆から外れることを防ぐため、鉛筆の太さに対してQキャップの穴が小さめに作られています。)

- Qキャップを鉛筆の奥まで差し込む必要はありません。鉛筆が入りきらない空洞部分を噛むことで、独特の噛む感覚に変化を得ることができます。
- 唾液などで汚れた場合は水道水等で洗浄してください。煮沸消毒もできます。



Qキャップは鉛筆から外さないでください(Qキャップは鉛筆に接着されています)

長さのひみつ



Q 一般文具のキャップより長いのはなぜ？
(キャップ長さ 80mm)

A Qキャップは長めにつくられているために、内部に鉛筆が入りきらない空洞の部分が多くできます。芯に鉛筆が入っている部分は硬く、Qキャップ内部が空洞の部分はやわらかく感じます。2種類の噛んだ感覚を体験いただけます。

耐熱性 耐熱温度 200° 耐寒温度 -40° 食器洗浄機で洗え、衛生的。 Qスケールのみ 耐熱温度 60°

耐候性 紫外線につよい。直射日光や高温多湿の場所で保管しても劣化しません。

シリコン製 超低硬度特殊シリコン素材。天然ゴム由来の成分による抗原抗体反応を引き起こしません。

耐薬品性 アルコール消毒ができ、衛生的。

耐水性 水洗いができ、衛生的。

食品衛生法基準クリア 万が一、口に入れてしまっても安心。

耐久性 長く使えて、経済的。

日本製 全製品、安心品質の100%日本製。

対象年齢 8才以上

お箸 練習支援具

Qビーズ

¥1,890(税込) ●カラー:ミックス

◇使用上の注意 ●口唇欲求があり口に入れてしまう方はご利用をご遠慮ください。●保護者の監督のもとご利用ください。●食品衛生法基準をクリアしておりますが、万が一誤飲された場合にはすぐに医師の診断を受けてください。●正しい使用方法については、作業療法士などの専門家に相談ください。



この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使い頂けます。

効果 お箸やスプーンなどの動作を効果的に練習できます



お箸の使い方の練習には、一般に市販のビーズや豆などが利用されてきました。これらの素材は表面が硬く滑りやすいため、お箸の練習をはじめたばかりの段階の方には難度が高いものです。

Qビーズは難易度が段階的に設定されているので楽しく練習が続けられ、効果的に上達できます。

このような方におすすめします


脳性まひ、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、発達性協調運動障がい、広汎性発達障がい、脳卒中片麻痺、利き手交換の必要な方、その他お箸やスプーン動作に練習が必要な方

Qビーズの特徴

- ビーズは複数の種類が入っており、練習に段階付けができます。
- シリコン素材のため、表面が滑りにくく練習が容易です。
- 適度な重さがあり、つまんでいる感覚を得やすいため練習がしやすくなっています。
- 大きさまや形のバリエーションが豊富です。お使いになる方の段階にあわせ、どれを使用するか比較検討することができます。
- 大きさまの違うビーズを混ぜて練習することでより難度の高い練習も可能となります。
- 麺をつまむ練習ができる形状タイプもご用意しました。



細長いものをつまむ練習もできます

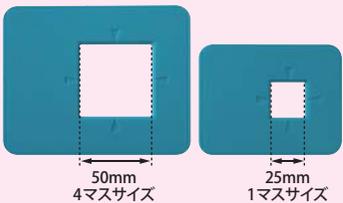

書き取り向上補助具

Qフレーム



実用新案登録済 (名前シール2枚入り) オモテ面に貼ってください

¥2,709(税込) ●2サイズセット(各1枚入り) 4マスサイズ/1マスサイズ ●カラー:ブルー

この製品は厚生労働省食品衛生法基準をクリアしており、安心してお使い頂けます。

Qフレームの効果


- 正方形のフチに鉛筆があたるため、文字をマス目からはみ出さずに書くことができます。
- 消しゴムで消す練習ができます。Qフレームが、必要な部分を消してしまうのを防ぎます。
- マス目に文字を収めて書くことができるため、効果的な書き取りの練習が可能となります。
- 国語8マスノート以外にも、様々なノートや紙でお使いいただけます。マス目がない紙での書き取りの練習も可能です。

このような方におすすめします

学習障がい、発達性協調運動障がい、注意欠陥多動性障がい、広汎性発達障がい、アスペルガー障がい、書き取りを習い始めのお子様、その他書き取りの練習が必要な方

使用方法

- 正方形にくりぬかれた穴を、国語8マスノートのマス目に合わせてください。マス目の中央に印刷された点線(十字リーダー)を、三角形のくぼみに合わせると更に合わせやすくなります。
- 現在一般的に市販されているノートには、25mmマスと26mmマス等の規格があります。
- 25mmマスノートをお使いの場合は、正方形の穴のフチをノートのマス目に合わせて①②ください。外周に掘られた溝にノートのマス目を合わせることもできます②。
- 26mmマスノートをご使用の場合は、製品の外枠とノートのマス目を合わせてください。

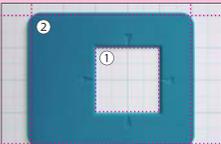

25mmマスノートで使用例

- 穴の横に設けられた余白部分には、鉛筆を持たない方の手を乗せて押さえてください。(下図参照)
- 習熟度に応じて2種類のサイズをご用意しました。
- 4マスに1文字を書き取る4マスサイズ
- 1マスに1文字を書き取る1マスサイズ

- 書き取りの練習をはじめたばかりのお子様は、大きい方(4マスサイズ)をお使いください。
- 同封の名前シールは、製品のオモテ面に貼ってください。溝や三角形のくぼみが掘られている面がオモテ面です。

26mmマスノートご使用例



お客様記入欄

会社名・団体名	様		
ご住所	〒		
お電話・FAX	TEL:	FAX:	
ご担当者氏名	フリガナ 様		
お支払い方法 チェックしてください	代金引換(現金)	代金引換 (クレジット・デビット)	銀行振込

商品名	色・セット内容	数量	販売価格(税込)	ご注文数
Qキャップ(1本入) 専用鉛筆付	オレンジ	1	¥680(税込)	本
	ブルー	1	¥680(税込)	本
Qキャップ(2本入) 専用鉛筆付	オレンジ ブルー	1 1	¥1,300(税込)	セット
Qキャップ(4本入) 専用鉛筆付	オレンジ ブルー	2 2	¥2,500(税込)	セット
Qフレーム(2枚入)	4マスサイズ:ブルー	1	¥2,709(税込)	セット
	1マスサイズ:ブルー	1		
Qカット	ブルー & オレンジ ミックス	1	¥10,290(税込)	個
Qビーズ(70g)	ミックス	1	¥1,890(税込)	セット

弊社記入欄

商品代金合計	商品点数	点	商品代金合計 ¥
送料	¥		
手数料	¥		(手数料内訳)
支払額合計	¥		
発送予定日			



携帯からも
注文できます

(株)ゴムQ 福祉事業部

静岡県掛川市国安24-8

TEL:0537-72-5772

FAX:0537-72-5772

Mail:info@gomuq.com

H P:www.gomuq.com